

检测报告

报告编号: 260609-01-01

共 1 页, 第 1 页


样品编号	260609-01-01	样品规格	10 皿/包
样品名称	Baird-Park 琼脂平板	样品货号	SP-002
样品批号	260609	检测日期	2026.6.10-6.12
检测依据	GB 4789.28-2024、YY/T 1239-2014、《中国药典》（2025 版）四部 通则 0631		

声明: 根据客户要求完成检测结果, 检测结果仅适用于收到的样品。

检测结果							
基本要求	检测项目		结果		参考范围		
	外观		淡黄色平板, 质地均匀, 无水珠和气泡; 厚度均匀; 平板表面平整, 光滑;		质地均匀、湿润, 无水珠、气泡; 厚度均匀; 表面平整光滑, 无突起, 凹痕或裂痕。		
	琼脂厚度		3.18mm		大于 3mm		
	凝胶强度		适中		软硬适中		
	pH 值		6.95		7.0±0.2		
	微生物污染		无杂菌生长		无污染		
	功能学分类	质控指标	培养条件	质控菌株	结果	评定标准	特征反应
微生物学要求	选择性计数	生长率	36℃±1℃ 24h~48h	金黄色葡萄球菌 ATCC 25923	0.79	PR≥0.7	菌落黑色凸起, 周围有一浑浊带, 在其外层有一透明圈
		特异性		表皮葡萄球菌 CMCC (B) 26069	—	—	黑色菌落, 无浑浊带和透明圈
		选择性		大肠埃希氏菌 ATCC 25922	G=0	G≤1	—
	-----		----- 以下为空白				

检验: 霍静珊

日期: 2026.6.12

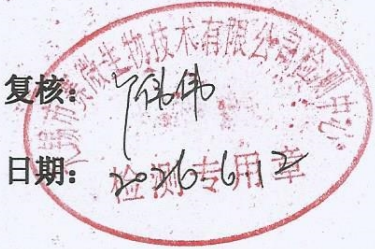

复核:

日期:

检测专用章